

# MediGel®

## gel za celjenje ran



### Navodila za uporabo - pozorno preberite!

## MediGel® gel za celjenje ran

Hidroaktivni lipogel s cinkom in železom za vlažno zdravljenje kožnih ran.

### Predviden namen

MediGel® gel za celjenje ran je lipogel za zunanje zdravljenje akutnih ran (npr. odrgnin, ureznin, prask in ugriznih ran\* ter razpok in raztrganin) ter opeklin 1. in 2. stopnje (mehurjev) in sončnih opeklin.

\* Pri ugriznih ranah se je treba zaradi velikega tveganja za okužbo pri začetnem zdravljenju nujno posvetovati z zdravnikom.

### Lastnosti

MediGel® gel za celjenje ran je bel lipogel brez vonja s hidroaktivnimi lastnostmi, ki združuje vlažilne lastnosti gela in negovalne lastnosti kreme. Primeren je za uporabo na suhih in zmerno mokrih ranah. MediGel® gel za celjenje ran zagotavlja načela vlažnega celjenja ran na več načinov za optimalno celjenje poškodovane kože. Nizka vrednost pH, podprta s prisotnostjo ionov cinka in železa, aktivira naravni proces celjenja in sproži nastajanje novega tkiva. Naravna negovalna olja in vitamin E podpirajo obnavljanje poškodovane kože. MediGel® gel za celjenje ran ljudje zelo dobro prenašajo, zato se lahko uporablja pri vseh družini, tudi pri otrocih in na občutljivi koži.

MediGel® gel za celjenje ran zaradi fizikalnih lastnosti kreme ustvarja naslednje pogoje za celjenje ran:

- Hitro lajšanje bolečine in hlajenje.
- Vzpostavitev primerne mikroklimе v rani.
- Spodbuja celjenje rane.
- Zmanjša oteklino.
- Zmanjša tveganje za okužbo.
- Zmanjša brazgotinjenje.


### Navodila za uporabo

Pred nanosom na rano in po njem si umijte roke. Pred zdravljenjem z MediGel® gelom za celjenje ran je treba rano skrbno očistiti.


Na očiščeno rano in čez robove rane (rana se celi od zunaj navznoter) nanesite približno 2 mm debelo plast MediGel® gela za celjenje ran. V prvih dneh po poškodbi lahko MediGel® gel za celjenje ran nanesete večkrat na dan.

Uporabljamo ga lahko v kateri koli fazi celjenja rane, dokler rana ni popolnoma zaceljena. Poskrbite, da vsebino nanesete higienično, tako da odprtina tube ne pride v stik z rano. MediGel® gel za celjenje ran je priporočljivo uporabljati v kombinaciji s komercialno dostopnim obližem ali povojem, ki bo zagotovil dodatno zaščito rane.


MediGel® gel za celjenje ran ne vsebuje snovi, ki dražijo kožo in se lahko uporablja v predelu sluznice (npr. nosu) ali na ustih.

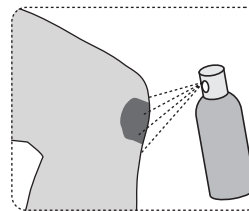


Očistite

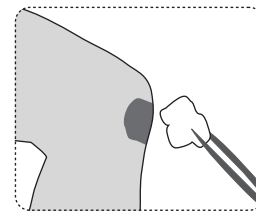

Osušite

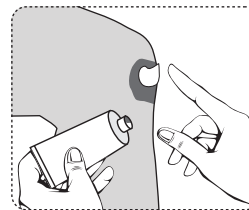

Nanesite

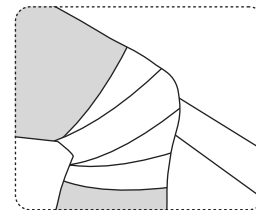

Prekrijte



Größe (offen): 164 x 297 mm

Größe (gefalzt):

Zeichnungsnummer: --

Laetuscode-Nr.: --

Erstellt am: 12.01.24

Art.-Nr.: 403091049201

Art.-Bez.: GI MediGel SI

Farben: ■ Schwarz

### Previdnostni ukrepi

- MediGel® gel za celjenje ran je namenjen samo za zunanjo uporabo in se ga ne sme zaužiti.
- Ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti na katero koli sestavino. Če se pojavi alergijska reakcija (kožni izpuščaj), prenehajte z uporabo lipogela.  
Nato lipogel previdno sperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- MediGel® gela za celjenje ran ne uporabljajte na vekah ali v očeh. Če pride MediGel® gel za celjenje ran v stik z očmi, jih izperite s tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- MediGel® gela za celjenje ran ne kombinirajte z izdelki, ki vsebujejo srebro ali okluzivnimi oblogami.
- Pri zelo velikih ranah, ranah z močnim izcedkom ali okuženih ranah se pred uporabo MediGel® gela za celjenje ran posvetujte z zdravnikom, saj bo morda potrebno dodatno zdravljenje.
- Če rana postane rdeča, boleča ali otekla ali če se rana v nekaj dneh ne zaceli, se posvetujte z zdravnikom.
- Če ste noseči ali dojite, lahko MediGel® gel za celjenje ran uporabljate le po posvetu z zdravnikom.
- Pri opeklinah stopnje 2b se je treba posvetovati z zdravnikom.
- Izogibajte se stiku s hrustančnim tkivom. MediGel® gela za celjenje ran ne smete uporabljati na intimnem predelu.

### Interakcije

Izdelka ne smete kombinirati z drugimi kremami ali mazili.

### Neželeni učinki

Za morebitne alergijske reakcije glejte poglavje „Previdnostni ukrepi“. Če opazite kakršne koli neželene učinke, o tem obvestite farmacevta ali proizvajalca.

### Navodila za shranjevanje

- Hranite zaščiteno pred mrazom in vročino! Lipogel shranjujte na suhem mestu in v originalni embalaži, pri temperaturi med 5 °C in 30 °C.
- Po uporabi tubo zaprite. V ta namen uporabljajte samo originalni pokrovček.
- MediGel® gela za celjenje ran ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži.
- Rok uporabe: 3 leta po izdelavi (tuba), 2 leti po izdelavi (vrečica).
- Rok uporabe: 90 dni po odprtju (tuba), za enkratno uporabo (vrečica).
- Prosimo, ne uporabljajte poškodovanih tub. Prepričajte se, da je pečat nepoškodovan.
- MediGel® gel za celjenje ran je treba hraniti zunaj dosega otrok!

### Sestavine

Prečiščena voda, oktildodekanol, hidrogenirani palmni gliceridi, PEG – 200 hidrogenirani gliceril palmat, cetilalkohol, hidroksipropil škrobni fosfat, tokoferol, benzilalkohol (in) metilkloroizotiazolinon (in) metilizotiazolinon, poliaminopropil bigvanid, silicijev dioksid, elementi v sledovih (cink, železo).

### Velikosti pakiranja

Tube po 5 g, 10 g, 20 g in 50 g ter vrečke po 2 g. Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj.

### Proizvajalec

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG  
Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn  
Telefon: +49 (0) 2371 937-0  
Faks: +49 (0) 2371 937-329  
E-pošta: info@medice.de  
www.medice.de

### So-distributer

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 35, 38259 Salzgitter  
Telefon: +49 5341 307-0  
Faks: +49 5341 307-124  
E-pošta: info@schaper-bruemmer.de  
www.schaper-bruemmer.de

### Kontakt za Slovenijo:

Stada d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana,  
www.stada.si

### Stanje informacij: marec 2023

### Razlaga simbolov na zunanji škatli



Upoštevajte navodila za uporabo



Uporabno do



Številka partije



Medicinski pripomoček



Ne uporabljajte poškodovane tube



Omejitev temperature



Proizvajalec



Samo za enkratno uporabo (vrečka 2g)



Zaščitite pred sončno svetlobo



Zaščitite pred vlago

